
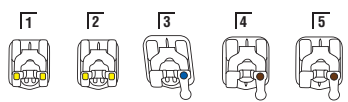
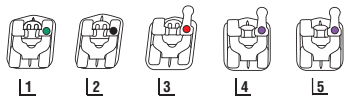
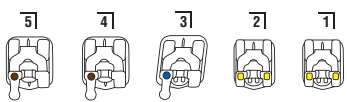



Ortho Technology's version of the Roth R[®]
"Does not imply doctor endorsement."

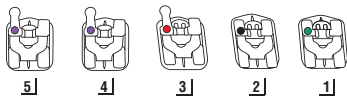

PC SKU #: L-00655 REV-0
© 2013 Ortho Technology, Inc.
Sensation is a trademark of Ortho Technology.

Instructions Enclosed

**Opening Method —
Sensation M
SLB Opening
Instrument
OT-8920**

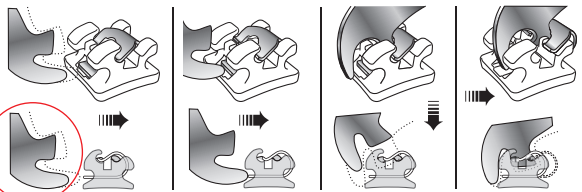

Sensation™ M Active Self-Ligating Bracket System

Instructions For Use

Opening

To open the Sensation M Active Self-Ligating Bracket spring clip, place instrument on the open clip slot directly beneath the bracket interface and gently push in the occlusal direction to disengage the bracket clip. Then place the instrument directly in the facial opening of the clip to engage the small extension of the spring clip. Pull in the occlusal direction. The spring clip will pop open.

Closing

To close the Sensation M Active Self-Ligating Bracket spring clip, simply put light finger pressure on the occlusal surface of the bracket. Make sure the spring clip fully closes so the archwire is securely engaged.

Warning

If the bracket and/or clip should become damaged or broken during use, it is recommended to replace the bracket.



Sensation™ M

Active Stainless Steel Self-Ligating
Bracket System



Ouverture

Pour ouvrir la pince à ressort du boîtier autoligaturant actif Sensation M, placer le dispositif sur la fente de la pince ouverte, directement sous l'interface du boîtier, et pousser délicatement dans la direction occlusale afin de dégager la pince du boîtier. Placer ensuite le dispositif directement dans l'ouverture faciale de la pince pour engager la petite rallonge de la pince à ressort. Tirer dans la direction occlusale. La pince à ressort s'ouvrira automatiquement.

Fermeture

Pour refermer la pince à ressort du boîtier autoligaturant actif Sensation M, il suffit d'exercer une légère pression du doigt sur la surface occlusale du boîtier. S'assurer que la pince à ressort se referme entièrement de sorte que l'arc en fil métallique soit solidement enclenché.

Mise en garde

Si le boîtier ou la pince devait s'abîmer ou se briser pendant leur utilisation, il est alors recommandé de remplacer le boîtier.

Apertura

Per aprire la spring clip dell'attacco autolegante attivo Sensation M, posizionare lo strumento sulla scanalatura della clip aperta che si trova immediatamente al di sotto dell'interfaccia dell'attacco e spingere delicatamente in direzione occlusale per disimpegnare la clip dell'attacco. Quindi posizionare lo strumento direttamente nell'apertura vestibolare della clip per innestare la piccola estensione della spring clip. Tirare in direzione occlusale. La spring clip si aprirà di scatto.

Chiusura

Per chiudere la spring clip dell'attacco autolegante attivo Sensation M, esercitare semplicemente una leggera pressione con il dito sulla superficie occlusale dell'attacco. Accertarsi che la spring clip si chiuda completamente in modo da far impegnare in sicurezza l'arco.

Avvertenza

Se l'attacco e/o la clip dovessero danneggiarsi o rompersi durante l'uso, si raccomanda di sostituire l'attacco.

Para abrir

Para abrir el clip de resorte del bracket de autoligado activo serie M Sensation, coloque el instrumento sobre la ranura del clip abierto abajo de la interfaz del bracket y empuje suavemente en sentido oclusal para desenganchar el clip del bracket. Coloque el instrumento a continuación directamente en la abertura facial del clip para enganchar la pequeña extensión del clip de resorte. Tire en sentido de la dirección oclusal. El clip de resorte se va a abrir.

Para cerrar

Para cerrar el clip de resorte del bracket de autoligado activo serie M Sensation, simplemente aplique presión ligera con el dedo sobre la superficie oclusal del bracket. Asegúrese que el clip de resorte se cierre completamente de manera que el alambre de arco esté firmemente engarzado.

Advertencia

Si el bracket y/o el clip se dañan o rompen durante el uso, se recomienda reemplazar el bracket.

Öffnen

Zum Öffnen des Federklipps der selbstbindenden Sensation M Active Bracket legen Sie das Instrument auf den geöffneten Schlitz im Klipp, direkt unter der Bracketnaht und schieben es vorsichtig in okklusaler Richtung vor, um den Bracketklipp zu lösen. Dann legen Sie das Instrument direkt an der fazialen Öffnung des Klipps an, bis die kleine Erweiterung des Federklipps einrastet. In okklusaler Richtung ziehen. Der Federklipp springt auf.

Abschluss

Zum Schließen des Federklipps an der selbstbindenden Sensation M Active Bracket drücken Sie einfach leicht mit dem Finger auf die okklusale Oberfläche der Bracket. Achten Sie darauf, dass der Federklipp vollständig geschlossen ist, damit der Bogendraht sicher eingelegt ist.

Warnung

Sollten Bracket und/oder Klipp bei der Verwendung beschädigt werden oder kaputt gehen, so wird empfohlen, die Bracket zu ersetzen.